

ELITECH MEDICAL DESTROYER END-1 (Satu Fungsi)



Saya made in INDONESIA
Produksi
Indonesia



SUKSESKAN GERAKAN
100%
INDONESIA

1 TAHUN
GARANSI RESMI
Free Servis dan Spare Parts

e catalogue



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

- Dapat menghancurkan berbagai macam ukuran jarum suntik : 1ml – 60ml, 16 – 30 gauge dalam waktu 6 detik
- Aman dan mudah penggunaannya
- Sangat bermanfaat untuk digunakan di rumah sakit, klinik, dan ruang pengobatan untuk menghancurkan jarum suntik dan jarum akupuntur
- Bodi terbuat dari ABS murni, berfungsi sebagai isolator dan pelindung bagi operator
- Berkemampuan besar untuk kapasitas peleburan ujung jarum per hari lebih dari 200 biji



CPAKB


CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK

HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

ELITECH MEDICAL DESTROYER END-1 (Satu Fungsi)



Saya made in INDONESIA
Produksi
Indonesia

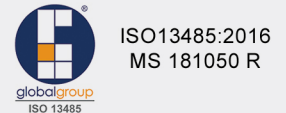

Model		END-1 (1 Fungsi)
Power Input		AC 220V-240V,50Hz
Daya		≥80W
Normal Operating	Ambient Temperature	-5°C - 40 °C
	Relative humidity	≤80%
	Aliran Kecepatan Udara Ruang	700hpa-1060hpa
Transport Operating	Ambient Temperature	-40°C - +50°C
	Relative humidity	≤95%
	Athmosphere	500hPa-1060hPa
Fungsi Alat (secara umum)		Penghancur Jarum suntik
Fungsi pertama (dengan Plat Elektrode)		Peleburan Ujung Jarum
Arus Sumber Listrik pada saat pengoperasian		<10A
Tegangan Trafo pada saat pengoperasian		AC 7.5V ± 10%
Tingkat Kebisingan		≤ 75dB (A)
Kecepatan Penghancuran		6 detik per biji (syring 3ml)
Tipe dan Ukuran Jarum Suntik yang akan dihancurkan		1ml ,2.5ml,5ml,10ml,20ml,50ml,dan 60ml
Sisa panjang ujung jarum yang tersisa pada pangkal		3mm-5mm
Dimensi		290 x 170 x 207 mm
Berat Bersih		2,9 kg

HUBUNGI: