

ELITECH MEDICAL DESTROYER END-1 (Tiga Fungsi)



- Dapat menghancurkan berbagai macam ukuran jarum suntik : 1ml – 60ml, 16 – 30 gauge dalam waktu 6 detik
- Merusak ujung pompa syringe dan Pangkal Jarum dengan Pisau Potong Baja Khusus sehingga pompa syringe sudah tidak dapat dipakai ulang lagi
- Merusak mekanisme pompa syringe dengan gergaji listrik sehingga tidak dapat dipakai ulang lagi
- Aman dan mudah penggunaannya
- Sangat bermanfaat untuk digunakan di rumah sakit, klinik, dan ruang pengobatan untuk menghancurkan jarum suntik
- Dapat digunakan untuk memotong Selang yang sudah terkontaminasi sehingga tidak dapat dipakai ulang lagi.




CPAKB
CARA PEMBUATAN
ALAT KESEHATAN
YANG BAIK
HK.02.04/VI/011/2016
PT. SINKO PRIMA ALLOY

ELITECH MEDICAL DESTROYER END-1 (Tiga Fungsi)



Saya made in INDONESIA
Produksi
Indonesia

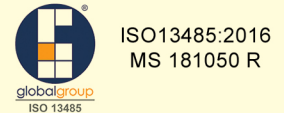

Model	END-1 (3 Fungsi)	
Power Input	AC 220V-240V,50Hz	
Daya Terpakai	≥80 W	
Normal Operating	Ambient Temperature	-5°C - 40 °C
	Relative humidity	≤80%
	Aliran Kecepatan	700hpa-1060hpa
Transport Operating	Ambient Temperature	-40°C - +50°C
	Relative humidity	≤95%
	Athmosphere	500hPa-1060hPa
Fungsi Alat (secara umum)	Penghancur Jarum suntik	
Fungsi pertama (dengan Plat Elektrode)	Peleburan Ujung Jarum	
Fungsi Kedua (Potong dengan Pisau Baja	Pemotongan Pangkal Jarum	
Fungsi Ketiga (Gergaji Listrik dengan Motor	Gergaji Ujung Pompa Syringe (merusak ujung syringe)	
Arus Sumber Listrik pada saat pengoperasian	<10A	
Tegangan Trafo pada saat pengoperasian	AC 7.5V ± 10%	
Tingkat Kebisingan	≤ 75dB (A)	
Kecepatan Penghancuran	6 detik per biji (syring 3ml)	
Tipe dan Ukuran Jarum Suntik yang akan	1ml ,2.5ml,5ml,10ml,20ml,50ml,dan 60ml	
Sisa panjang ujung jarum yang tersisa pada	3mm-5mm	
Dimensi	315x170x207 mm	
Berat Bersih	3,85 kg	

HUBUNGI: